

beurer

BY 20



RUС **Весы для новорожденных**
Инструкция по применению

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель!

Мы рады, что Вы остановили свой выбор на изделии нашего ассортимента. Имя нашей фирмы служит порукой высокого качества и многократно проверенной надежности изделий в области тепловой терапии, аппаратов мягкого воздействия, аппаратов для измерения артериального давления и диагностики, для взвешивания, массажа и аэротерапии.

Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации, сохраняйте ее для дальнейшего использования, дайте ее прочитать и другим пользователям и строго следуйте приведенным в ней указаниям.

С дружескими пожеланиями сотрудники компании Veurer


Важные указания

1. Предупреждение

- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Ремонт весов может выполнять только отдел обслуживания покупателей фирмы Бойерер или лицензированные продавцы.
- Все весы соответствуют директиве ЕС 89/336 + дополнение. Если у Вас есть еще какие-то вопросы по применению наших аппаратов, обращайтесь, к своему продавцу или в отдел обслуживания покупателей фирмы Бойерер.
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.
- Хранение: по окончании работы с весами убирайте с них все предметы.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Максимальная допустимая нагрузка при взвешивании на весах составляет 20 кг (44 lb/764 oz). Шаг измерения при указании результата взвешивания составляет 10 г (0,02 lb/0,5 oz).
- Весы не предназначены для профессионального использования.
- Удалить возможные транспортировочные предохранительные устройства.
- Установите весы на ровном устойчивом месте; устойчивая поверхность является предпосылкой для правильного измерения.


2. Работа с прибором

2.1 Батарейка

Весам для работы нужны четыре литиевые батарейки типа 1,5 V Alkaline Micro AAA. Их необходимо установить перед вводом весов в эксплуатацию соответственно маркировке полюсов в отсеке для батареек, расположенном на нижней стороне весов. Когда появится сообщение «», батарейку следует заменить.


Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону.

Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

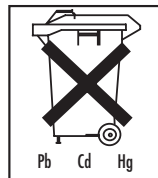

2.2. Взвешивание

Вес указывается с шагом 10 г, начиная с минимального веса 200 г.

Для включения весов нажмите кнопку „“:

Вначале появляется последний введенный в память результат измерения. Появление индикации „0.00 kg“ и „ready“ означает, что весы готовы к следующему измерению.

Теперь уложите ребенка на платформу весов. При этом соблюдайте предельную осторожность, не допускайте падения ребенка и особо следите за его головой.

Эти весы имеют функцию удержания „HOLD“: Эта функция фиксирует вес ребенка, как только он лежит достаточно спокойно для этого, чтобы обеспечить точный результат измерения. Если же ребенок делает резкие движения, вес не может быть определен. Поэтому попытайтесь успокоить барахтающегося ребенка, чтобы обеспечить быстрое измерение. Но не касайтесь при этом ребенка, чтобы не повлиять на результат измерения.

Как только вес ребенка зафиксирован, появляется мигающая индикация „HOLD“, и еще 5 секунд указывается вес. После этого весы автоматически отключаются. Если Вы хотите ввести значение веса в память, Вы должны нажать „M“ в течение этих 5 секунд. Вместо „HOLD“ теперь мигает индикация „M“: Это значение введено в память и появляется, когда Вы в следующий раз включаете весы.

Если Вы не хотите укладывать ребенка непосредственно на платформу весов, а, например, хотите подложить полотенце, то Вы должны уложить полотенце на весы ДО их включения. Если полотенце и другие веса, которые Вы хотите вычесть из результата измерения, весят более 200 г, то Вы можете также воспользоваться функцией TARA. Нажмите кнопку TARA, когда подлежащие вычитанию веса измерены и мигает индикация „HOLD“: После этого уложите ребенка на весы и продолжите измерение, как описано выше.

В состоянии при поставке весы настроены на единицу измерения «кг». Кнопкой „kg/lb/oz“ Вы можете в любой момент выполнить настройку на единицы измерения килограмм „kg“, фунт „lb“ и унция „oz“:

2.3 Утилизация

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC «Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Elektronik Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



3. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойер Гмбх, Софлингер штрассе 218
89077-УЛМ, Германия

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90



Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп магазина _____